



Sobre a Pharmaesthetics®


Laboratório Farmacêutico que oferece uma gama inovadora de produtos estéticos e terapêuticos minimamente invasivos com evidência e comprovação científica.

Tecnologia franco-suíça com produção no Brasil, o que permite que seus profissionais altamente capacitados acompanhem de perto todo processo de fabricação dos produtos do portfólio oferecido aos profissionais da saúde.



Escaneie o QR Code
e conheça nossa fábrica.

@pharmaesthetics_official
www.pharmaesthetics.com.br
SAC: sac@pharmaesthetics.com.br
0800 9439 080

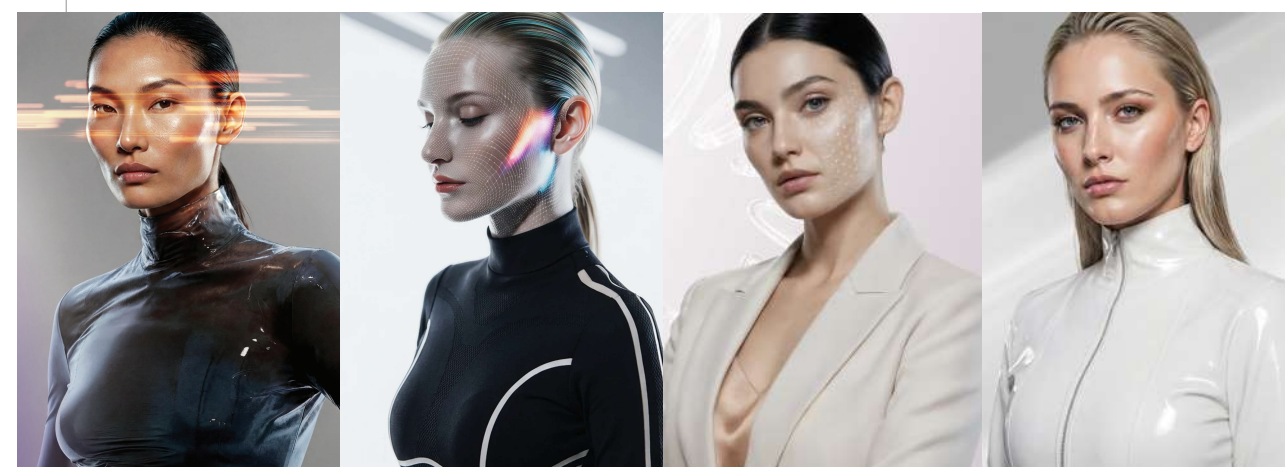

BEAUTY TECHNOLOGY



CLIENTES PHARMAESTHETICS
TEM A OPORTUNIDADE DE ADQUIRIR
NOSSAS TECNOLOGIAS COM VALORES
E CONDIÇÕES ESPECIAIS.

Pensando em apoiar profissionais que desejam expandir seus resultados clínicos com mais tecnologia, previsibilidade e eficiência, apresentamos uma oportunidade especial para seu acesso às principais soluções tecnológicas. É uma oportunidade pensada para quem quer alavancar seus atendimentos, ampliar o portfólio de tratamentos e gerar ainda mais valor para o paciente, com condições facilitadas e alinhadas à realidade da prática clínica.

O PRÓXIMO NÍVEL DA SUA PRÁTICA COMEÇA AGORA.

Mais tecnologia, mais resultados, mais valor percebido – para você se destacar, evoluir e crescer de forma consistente.

visalift®



Ultrassom micro e macrofocado para face e corpo, com atuação em múltiplas profundidades. Permite tratar desde camadas mais superficiais até planos mais profundos, promovendo firmeza, estímulo de colágeno e redefinição do contorno, com versatilidade para diferentes áreas e protocolos.

revitalift®



O Revitalift combina radiofrequência fracionada com microagulhas para criar microzonas térmicas de alta precisão. Essa tecnologia promove estímulo intenso de colágeno e elastina, resurfacing controlado e recuperação acelerada – com conforto superior graças ao sistema de crioanestesia integrado.

proinjector®



Sistema de drug delivery para entrega precisa e segura de ativos no tecido, por meio de multiagulhas. Ideal para protocolos de mesoterapia e bioestimulação, garantindo uniformidade, profundidade controlada e otimização dos resultados.

FOCUS_{DUAL}



Tecnologia combinada de ultrassom microfocado e radiofrequência fracionada com sucção. Uma solução completa que associa estímulo térmico profundo e superficial, potencializando resultados em flacidez, textura da pele e remodelação, com maior controle e eficiência nos tratamentos.

visalift®

Ultrassom micro e macrofocado para face e corpo, com atuação em múltiplas profundidades. Permite tratar desde camadas mais superficiais até planos mais profundos, promovendo firmeza, estímulo de colágeno e redefinição do contorno, com versatilidade para diferentes áreas e protocolos.



pharmaesthetics®
WE CARE



Ultrassom focalizado
para tratamento não invasivo
de pequenas e grandes áreas
com resultados imediatos
e de longa duração.

TECNOLOGIA CAPAZ
DE ATENDER UMA AMPLA
DEMANDA ESTÉTICA
FACIAL E CORPORAL.

Uma alternativa segura para tratamentos
das áreas mais sensíveis com alta precisão.

Tecnologia exclusiva ONE HOLE: **menor energia**
e maior segurança para melhores resultados.

PRECISÃO NA APLICAÇÃO EM ÁREAS MENORES DEVIDO AO DESIGN TIPO CANETA (CARTUCHO):

Produto ideal para tratar áreas menores,
de difícil acesso e regiões mais delicadas.
Alto estímulo de colágeno, eliminando
a flacidez das áreas da face e corpo.

Resultados imediatos e progressivos
apresentados por meio do estímulo de colágeno
produzido pela tecnologia.

Indolor: sem necessidade de aplicação de cremes
anestésicos, permitindo tratamentos mais rápidos
com maior agilidade no atendimento.

Diferentes calibres
de cartuchos para
tratamentos corporais
e faciais.




Excelente alternativa
para ser associada
a outros tratamentos estéticos.



Capacidade de realizar 2x mais
tratamentos com um único
cartucho e com excelente
retorno sobre o investimento.




Segurança adicional:
se o movimento da aplicação
for interrompido, a saída
de energia é bloqueada
automaticamente.

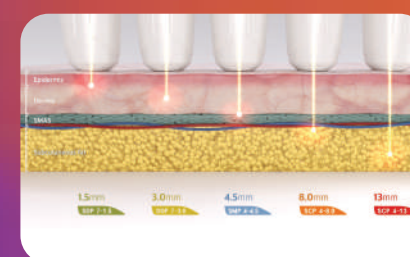

Até 7 pontos de coagulação
por segundo.

1 ponto/segundo
3 pontos/segundo
7 pontos/segundo

Energia uniforme
e estável do primeiro
ao último disparo.

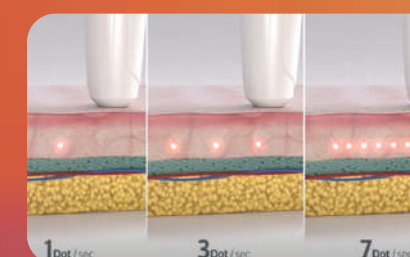

200.000 disparos válidos
por cartucho: mais economia.

Variedade de cartuchos:
1,5 mm, 3,0 mm,
4,5 mm, 8,0 mm, 13 mm

Possibilita alcançar até
a camada mais profunda
da derme garantindo
uma coagulação precisa
dos pontos tratados.



2 sensores diferentes
para sua segurança:

Hall Sensor
& Gyro Sensor

Controle de saída de energia
e controle de temperatura
(máximo de 43°C)



Sistema de drug delivery para entrega precisa e segura de ativos no tecido, por meio de multiagulhas. Ideal para protocolos de mesoterapia e bioestimulação, garantindo uniformidade, profundidade controlada e otimização dos resultados.





A tecnologia que redefine a entrega de ativos na pele.

PRECISÃO É A NOVA ESTÉTICA.

Com tecnologia de múltiplas agulhas, controle total da profundidade e um sistema de sucção que reduz dor, hematomas e perda de produto, o PRO INJECTOR é um dispositivo de aplicação intradérmica de alto desempenho, indicado para uso exclusivo de profissionais de saúde que buscam precisão, previsibilidade, reprodutibilidade e excelência em seus protocolos.

ENTREGA HOMOGÊNEA. PADRONIZAÇÃO. PREVISIBILIDADE. PERFORMANCE.

Sistema de sucção que estabiliza a pele, reduz dor, previne hematomas e aumenta o controle.

Sistema de múltiplas agulhas (5 ou 9 agulhas) para ganho de performance com aplicação simultânea e homogênea.




Distribuição uniforme da solução.

Mesma dose em cada ponto aplicado.

Padronização da entrega e reprodutibilidade do protocolo de procedimento.

Regularidade técnica e profissionalismo.

Controle preciso da profundidade e da dose, podendo ser intermitente ou contínua.

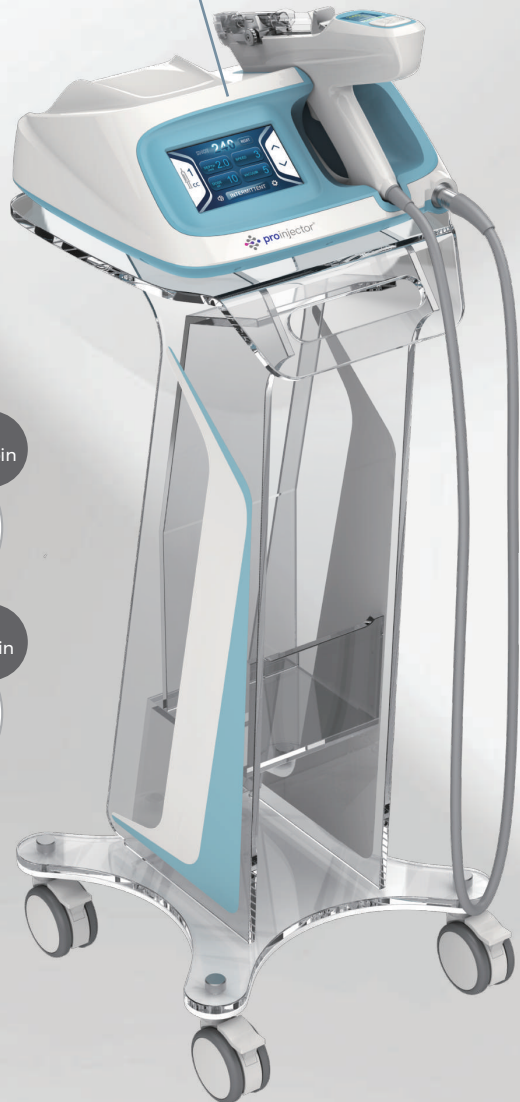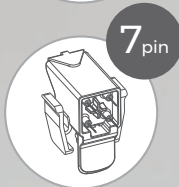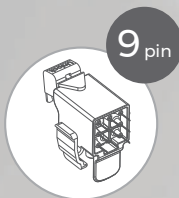

PRECISÃO, SEGURANÇA E PERFORMANCE EM INJEÇÕES INTRADÉRMICAS.

O PRO INJECTOR foi desenvolvido para elevar o padrão dos tratamentos intradérmicos, oferecendo precisão absoluta, distribuição homogênea e controle total da aplicação.

Innovative Technology
For Your Medical Aesthetic Needs

SEGURANÇA

- Segurança integrada em todo o processo
- Air Filter System - evita contaminação
- Ajuste preciso da profundidade
- Liberação automática e uniforme
- Procedimento mais confortável ao paciente

DIFERENCIAIS TÉCNICOS

Compatibilidade Universal

Seringas de 1 mL, 2 mL, 3 mL e 5 mL — incluindo produtos pré-preenchidos via Luer Lock.

Profundidade Ajustável

(profundidade de 0,2 mm a 5,0 mm).

Perfeito para áreas delicadas ou de maior exigência de precisão.

Controle da Dose

Modo Intermitente — Dose por disparo

• 5, 10, 15, 20, 25 ou 30 µL por disparo
Ideal para protocolos pontuais e técnicos.

Modo Contínuo — Dose por minuto

Fluxo constante e uniforme para grandes áreas.

ESPECIFICAÇÃO

Needle Information	31G, 5Pin & 9Pin multi needle type
Needle Penetration Control	0.2~5.0mm(interval 0.2mm)
Syringe Type	1cc / 2cc / 3cc / 5cc
Operation Mode	Intermittent, Continuous
Input Power	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Dimension (WxDxH mm)	Injector 293x49x168 / Body 333x298x130
Weight	9kg



O Revitalift combina radiofrequência fracionada com microagulhas para criar microzonas térmicas de alta precisão. Essa tecnologia promove estímulo intenso de colágeno e elastina, resurfacing controlado e recuperação acelerada — com conforto superior graças ao sistema de cri anestesia integrado.





Radiofrequência fracionada com microagulhas (FMR) e sistema de crioterapia (CRYO SYSTEM) – a evolução da dermatologia regenerativa.

UM TRATAMENTO MODERNO, EFICAZ E MINIMAMENTE INVASIVO COM ALTA PERFORMANCE, PREVISIBILIDADE E SEGURANÇA.

Estudos demonstram que a energia de radiofrequência fracionada com microagulhas (FMR) é eficaz no tratamento de rugas, poros, cicatrizes de acne e, adicionalmente, mostra potencial de atuação direta sobre glândulas sudoríparas profundas – preservando a superfície cutânea*.

ESTÍMULO PROFUNDO DE COLÁGENO E ELASTINA.

‘Cryo System’, desenvolvido para anestesia superficial da pele (analgesia). Garante proteção epidérmica, controle de superfície e potencial redução de inflamação superficial, proporcionando um tratamento com mais conforto e segurança.

O contato com a área tratada ajuda a aliviar a dor e relaxar a pele através do resfriamento, reduzindo o tempo de tratamento e permitindo que o paciente retorne rapidamente à rotina.

RF Fracionada com Microagulhas BI-POLAR RF

As microagulhas finas entregam energia de RF bipolar diretamente na derme.

A energia térmica induz a produção de novo colágeno e elastina.

RENOVAÇÃO PROFUNDA DA PELE COM SEGURANÇA, PRECISÃO E CONFORTO

O Revitalift combina radiofrequência fracionada com microagulhas para criar microzonas térmicas precisas e de alta precisão. Essa tecnologia promove estímulo intenso e remodelação de colágeno e elastina, resurfacing controlado e recuperação acelerada – com conforto superior graças ao sistema de cri anestesia integrado.

ETAPAS DO TRATAMENTO:

PASSO 1

As múltiplas agulhas entregam energia de RF diretamente na profundidade desejada. Procedimento minimamente invasivo.

Redução do downtime:
retorno rápido às atividades diárias

PASSO 2 / Após o tratamento

Melhora da estrutura do colágeno, aumento da elasticidade, redução imediata de poros e rugas devido à energia térmica da RF.

Suavização de cicatrizes e rugas
com melhora visível na textura da pele

PASSO 3 / Após 2 a 3 semanas

A cicatrização promove regeneração de colágeno e elastina, melhorando a elasticidade e a aparência da pele através da contração dos tecidos lesionados.

INDICAÇÃO

- / Rugas finas e moderadas
- / Cicatrizes de acne
- / Poros dilatados
- / Flacidez leve a moderada
- / Textura irregular da pele
- / Manchas superficiais (vermelhas e marrons)
- / Estrias

SISTEMA DE SUCÇÃO INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE VÁCUO

Estabiliza e traciona a pele em tempo real, criando uma base firme para aplicação precisa e uniforme da energia.

Maior controle, previsibilidade e segurança clínica.
Aplicação mais homogênea
Redução de dor e desconforto
Menor refluxo
Padronização técnica do procedimento
Precisão da profundidade desejada.

MICROAGULHAS DOURADAS

A ponteira penetra a pele de forma controlada, entregando energia de RF diretamente na derme. Cada agulha possui revestimento em ouro, garantindo condutividade eficiente. Ponteiros Removíveis e Intercambiáveis. Disponíveis em 10, 25 e 36 pinos. Uso único.

Disponíveis para selecionar a agulha ideal conforme o objetivo do tratamento: agulha isolada ou agulha não isolada.

Espessura 0,25 Ø
Revestimento em ouro de 24 k
Revestimento em Teflon

*Citação científica:

Kim M, Shin JY, Lee J, et al. Efficacy of fractional microneedle radiofrequency device in the treatment of primary axillary hyperhidrosis. Dermatology. 2013



MOTOR DE PASSO

Ação sofisticada que proporciona maior estabilidade durante o tratamento.

PARÂMETROS TOTALMENTE AJUSTÁVEIS

Profundidade, potência, sucção e tempo de exposição — tudo calibrado conforme o paciente.

AQUECIMENTO VOLUMÉTRICO

A energia atua profundamente, estimulando colágeno e elastina de maneira intensa.

CORRENTE BIPOLAR

Efeito térmico localizado apenas na área desejada, sem passagem de corrente pelo corpo.

ABLAÇÃO SUPERFICIAL E FRACIONADA + AQUECIMENTO PROFUNDO EM UM ÚNICO DISPARO.

A camada superficial sofre remoção controlada, promovendo renovação celular e melhora da textura.

REGENERAÇÃO ACELERADA

O tecido ao redor permanece preservado, permitindo cicatrização mais rápida e segura.

HOUSING (CORPO DO APLICADOR):

design ergonômico que oferece precisão e conforto no manuseio.

ESPECIFICAÇÃO

Energy Type	RG Multi Needle / Cryo
6 Kinds of RF Needle	10 pin (insulated / non-insulated)
	25 pin (insulated / non-insulated)
	36 pin (insulated / non-insulated)
Needle informatios	0.25 ø, gold coating
Input power	AC 100~240 V, 50/60 Hz
Dimension (WxDxH mm)	385 x 461 x 226

FOCUS_{DUAL}

Tecnologia combinada de ultrassom microfocado e radiofrequência fracionada com sucção. Uma solução completa que associa estímulo térmico profundo e superficial, potencializando resultados em flacidez, textura da pele e remodelação, com maior controle e eficiência nos tratamentos.





Tecnologia 2-em-1 Avançada
para Estética Facial e Corporal

TECNOLOGIAS INTEGRADAS
PARA MAIOR PREVISIBILIDADE,
CONTROLE, PADRONIZAÇÃO
E PERFORMANCE CLÍNICA:



HIFU

ação em camadas
profundas e SMAS




RADIOFREQUÊNCIA
MICROAGULHADA

regeneração
dérmica

O FUTURO DO REJUVENESCIMENTO
CHEGOU EM DOSE DUPLA.

Duas tecnologias complementares
para atuar em todos os níveis da
pele. Permite tratamentos
personalizados e eficazes, de alto
valor agregado para clínicas
focadas em resultados superiores.


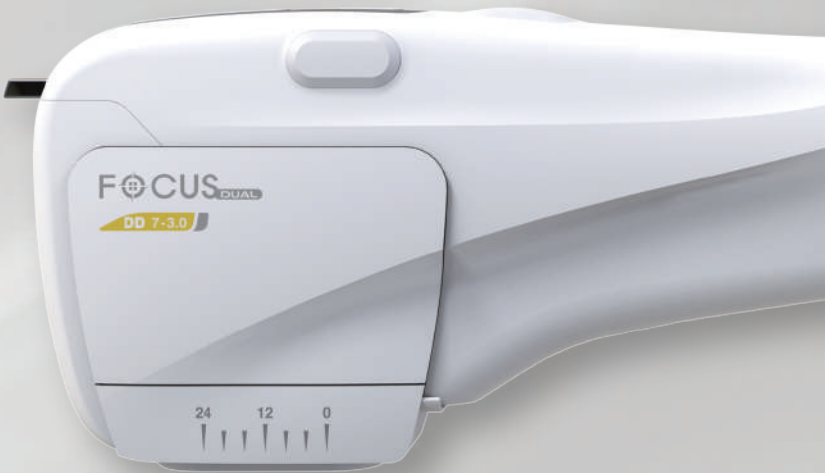


A TECNOLOGIA ONE HOLE
CONCENTRA. A ENERGIA
NO PONTO EXATO DO DISPARO,
EVITANDO DISSIPAÇÃO
E GARANTINDO RESULTADOS
MUITO MAIS PRECISOS.



SM 4-4.5 DD 7-3.0 SD 7-1.5 SC 4-6.0

Regular transducer vs Transhole transducer

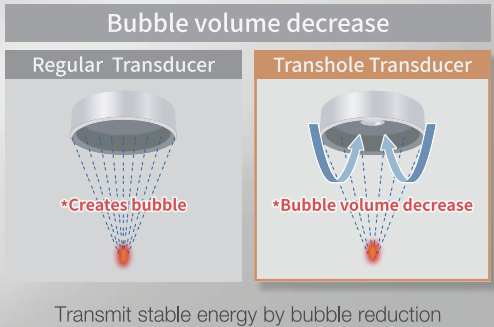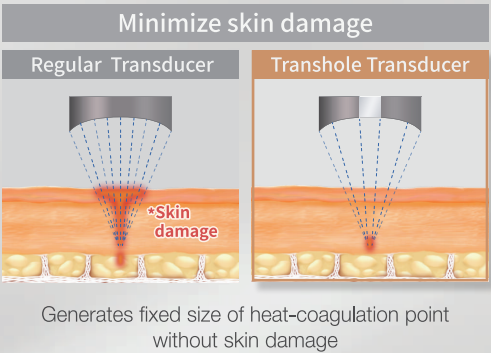



Tecnologia 2-em-1 Avançada
para Estética Facial e Corporal

HIFU

ação em camadas
profundas e SMAS



RADIOFREQUÊNCIA
MICROAGULHADA

regeneração
dérmica

TECNOLOGIA DE VÁCUO INTEGRADA (TRATAMENTO 3D)

O sistema de sucção estabiliza a pele, permitindo maior precisão e conforto durante a aplicação da microagulha.

AGULHAS ISOLADAS (TRANSMISSÃO INTENSA DE ENERGIA RF) E NÃO ISOLADAS (TRANSMISSÃO TOTAL DE ENERGIA RF)

Permitem tratamentos personalizados para diferentes condições e áreas da pele.

Variação de Ponteiros e Configurações

- **Profundidades variáveis para RF e HIFU**
- **Diversos tipos de ponteiros**
(10 pinos, 25 pinos, 36 pinos e múltiplas opções HIFU)
- **Controle preciso de parâmetros para resultados**
consistentemente adaptados ao paciente.



INTERFACE E USABILIDADE DE FÁCIL OPERAÇÃO.

Possui profundidade ajustável e parâmetros específicos para diferentes necessidades.

Tratamentos com menor desconforto e tempo de recuperação reduzido em comparação com tecnologias isoladas.

INDICAÇÃO

- \ Rugas finas e moderadas
- \ Cicatrizes de acne
- \ Poros dilatados
- \ Flacidez leve a moderada
- \ Textura irregular da pele
- \ Manchas superficiais (vermelhas e marrons)

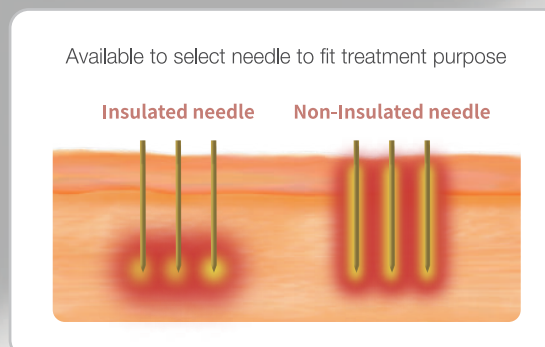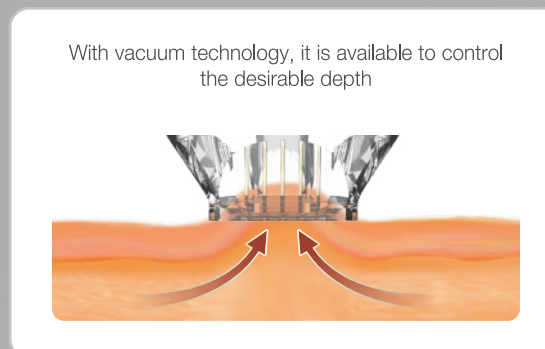

RF MICROAGULHADA FRACIONADA: ESTIMULA A REGENERAÇÃO DE COLÁGENO E ELASTINA EM MÚLTIPLAS CAMADAS DA PELE.

- Microagulhas finas que entregam energia de RF diretamente na derme, estimulando colágeno e elastina.
- Melhora rugas, textura da pele, flacidez, papada, cicatrizes de acne e estrias.
- Profundidade controlada para tratamentos adaptados à necessidade do paciente.


HIFU (ULTRASSOM MICROFOCADO DE ALTA INTENSIDADE)

atua em múltiplas camadas, desde as camadas profundas, incluindo o SMAS, promovendo lifting e firmeza sem cirurgia


- Não invasivo — promove lifting facial profundo ao atuar na camada SMAS (a mesma que é trabalhada em cirurgias).
- Ajuda a firmar a pele flácida, redefinir contornos e estimular produção de colágeno.

3 types and 6 kinds of needles that can be customized treatment for each site

*Thickness $\varnothing$ 0,25 / Gold coating

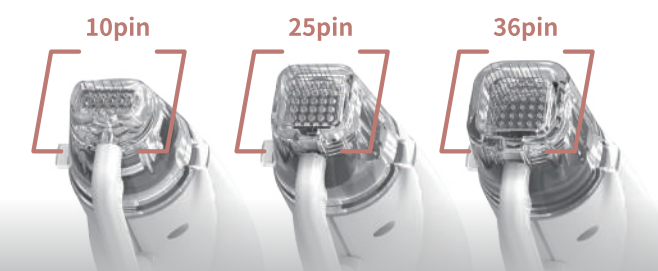

With sophisticated action, can stable treatment

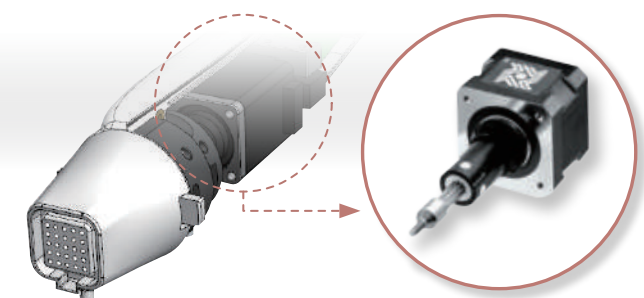

ESPECIFICAÇÃO

Energy type	RF Multi Needle / HIFU
6 kinds of RF Needle	10pin (insulated / non-insulated) 25pin (insulated / non-insulated) 36pin (insulated / non-insulated)
Cartridge	SM4-4,5 / DD7-3,0 / SD7-1,5 / SD7-1,5N / SC4-13
Input Power	AC 100~240 V, 50 / 60 Hz
Weight(kg)	9,6
Dimension(WxDxH mm)	385 x 461 x 226